

# Xtend® Connect Prime

## Teknisk specifikation

Xtend Connect Prime är en patenterad snabbkoppling. Den hjälper användaren ta isär sina proteskomponenter för att göra det lättare att byta fötter, byta byxor eller bara för att spara plats, till exempel vid resor. Xtend Connect Prime fungerar som vilken adapter som helst och passar övriga komponenter på protesmarknaden.

### Dubbel säkerhet

Xtend Connect Prime är den enda snabbkopplingen med dubbel låsfunktion (säkerhetstryckknapp och låshjul). Detta garanterar säker användning.



### Patientvikt

Maximal patientvikt är 150 kg och får ej över-skridas. Kontrollera alltid användarens vikt.



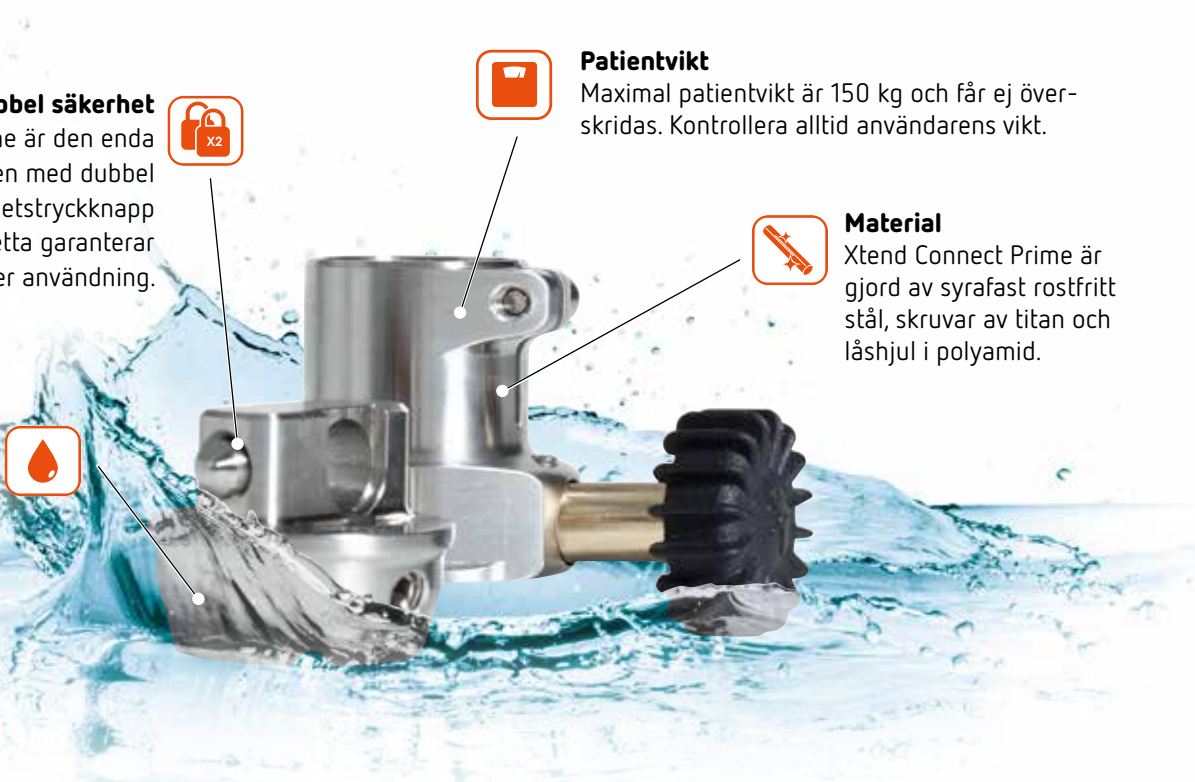
### Material

Xtend Connect Prime är gjord av syrafast rostfritt stål, skruvar av titan och låshjul i polyamid.



### Vattensäker

Alla delar kan användas i pool, salt- och sötvatten.



### Snabbfästen och basdelar

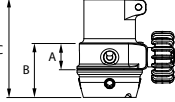
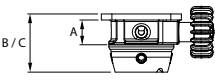
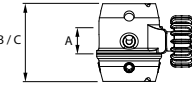
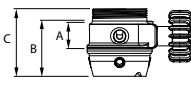
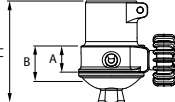
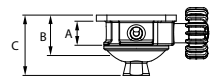
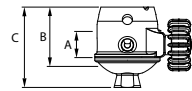
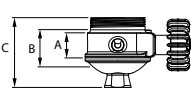
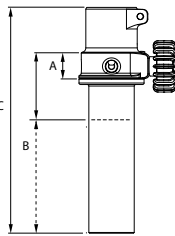
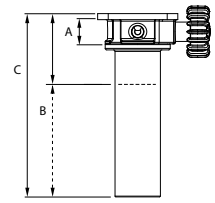
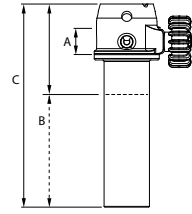
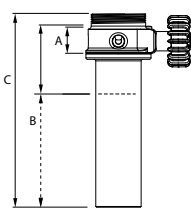
	Artikelnummer	Beskrivning
	A100-Q30-150	Snabbfäste med rörklämma 30 mm. 150 kg
	A100-Q4-150	Snabbfäste med 4-hålsadapter. 150 kg
	A100-QF-150	Snabbfäste med honpyramidadapter. 150 kg
	A100-QP-150	Snabbfäste med gängadapter. 150 kg
	A100-BF-150	Basdel med honpyramidadapter. 150 kg
	A100-BM-150	Basdel med hanpyramidadapter. 150 kg
	A100-B30-150	Basdel med 30 mm rör, 150 kg

### Xtend Connect Prime Configurator



Scanna QR-koden och använd vår konfigurator för att se vilka komponenter du behöver!

# Tekniska fakta – kombinationer

	<b>Q30</b> Snabbfäste med rörklämma 30 mm	<b>Q4</b> Snabbfäste med 4-hålsadapter	<b>QF</b> Snabbfäste med honpyramidadapter	<b>QP</b> snabbfäste med gängadapter
<b>BF</b> Basdel med honpyramidadapter	 A:19 D:208 B:36 E:332 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:346 C:39	 A:19 D:222 B:52 E:346 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:309 C:45
<b>BM</b> Basdel med han- pyramidadapter	 A:19 D:208 B:24 E:329 C:67	 A:19 D:208 B:27 E:344 C:40	 A:19 D:239 B:40 E:345 C:53	 A:19 D:208 B:25 E:306 C:46
<b>B30</b> basdel med 30 mm rör	 A:19 D:208 B:51-151* E:493* C:181	 A:19 D:208 B:54-154* E:507* C:154	 A:19 D:218 B:67-167* E:508* C:167	 A:19 D:208 B:60-160* E:471* C:160

**A** Funktionell höjd i mm **B** Effektiv höjd i mm **C** Total höjd i mm **D** Effektiv vikt i g **E** Total vikt i g

\*B30: Anpassbar effektiv höjd och vikt då röret kan kapas av med upp till 100 mm.

## Så här beställer du

Xtend Connect Prime levereras med svart låshjul som standard. För orange låshjul lägg till -O som suffix till artikelnumret. Maximal vikt är 150kg, Kontrollera alltid att patientens vikt är korrekt. Vid högtintensivt sport-utövande är den maximala patientvikten 100 kg.