

Xtend® Connect Shape

Connessione/Rilascio Rapido Invisibile



Materiale

Realizzato in alluminio leggero



Doppia sicurezza

Funzione di blocco a doppia sicurezza con due pulsanti



Peso del paziente

Il peso massimo del paziente è di 100 kg

Rendere la vita quotidiana più facile

Il brevetto Xtend Connect Shape è un adattatore protesico progettato per essere installato all'interno di un rivestimento estetico, sebbene funzioni altrettanto efficacemente anche senza. È un valido supporto per le attività quotidiane, sia che l'utente lo gestisca autonomamente o con l'aiuto di qualcuno.



Indossare gli abiti

Indossare i pantaloni sopra un piede protesico rigido può essere piuttosto difficile, soprattutto con pantaloni stretti. Tuttavia, con Xtend Connect Shape, basta rimuovere il piede, infilare i pantaloni e riattaccare facilmente il piede. Voilà!



Cambiare le scarpe

Passare da una scarpa all'altra o allacciare comodamente le scarpe può essere reso più facile con entrambe le mani. Basta togliere il piede e metterlo sulle ginocchia mentre si esegue l'operazione. Questo metodo è utile per chi preferisce sedersi mentre cambia le scarpe o le allaccia, rendendo l'operazione più comoda, sicura e conveniente.



Rilassarsi con comfort e stile

A volte, i piedi o le gambe protesiche rigidi e pesanti rendono difficile trovare una posizione comoda e rilassante. Ovunque si posizioni l'adattatore, è più facile poter scollare le parti quando necessario. Se l'Xtend Connect Shape è posizionato sopra il ginocchio, l'utente può facilmente scaricare il peso completo della gamba quando necessario.

È così fantastico che non si vede nemmeno!




Un adattatore completamente funzionale in una gamba con cosmesi, senza essere visibile. Elegante e funzionale allo stesso tempo.




Richiede una forza minima

La costruzione dell'Xtend Connect Shape lo rende facile da maneggiare. Può essere facilmente azionato con una sola mano, ma se ciò non è possibile, una spinta con due mani funziona altrettanto efficacemente.

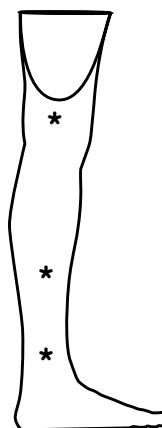

! Si adatta perfettamente alla presa per il sistema Pinlock.

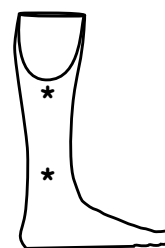

* Possibili punti di installazione dell'Xtend Connect Shape.

Dal punto di vista tecnico

L'Xtend Connect Shape è composto da due componenti principali: un'unità di montaggio rapido e un'unità base, che possono essere posizionati in qualsiasi direzione che tu e il tuo paziente riteniate più adatta.

I pulsanti per il meccanismo di blocco possono essere tagliati alla lunghezza desiderata durante l'adattamento allo spessore della gamba e della cosmesi, per ottenere una vestibilità perfetta.



Peso del paziente
Il peso massimo del paziente è di 100 kg. Controlla sempre il peso del paziente. Il peso massimo non deve essere superato.

Doppio blocco
Per sbloccare il dispositivo, entrambi i pulsanti devono essere premuti contemporaneamente. Questo garantisce un uso sicuro.



Pulsanti
Viene fornito con due set di pulsanti: due per la protesi di prova e due per la versione finale.


Rivestibile
L'unità Quick Fit e l'unità base funzionano in qualsiasi direzione.

Materiale
La forma è realizzata in alluminio leggero. Ricoperta con un rivestimento speciale che garantisce una connessione fluida e facile. Il colore del prodotto potrebbe variare.

Peso
Peso totale 328 g.

I diversi componenti dell'Xtend® Connect Shape

Numero dell'articolo	Descrizione
 A200-SK	Kit completo – pronto all'uso: Unità Quick Fit e Unità Base, entrambe con adattatore piramidale femmina.
 A200-SQF	A la carte – consigliato se sono necessarie più unità: Unità Quick Fit con adattatore piramidale femmina.
 A200-SBF	Unità base con adattatore piramidale femmina.

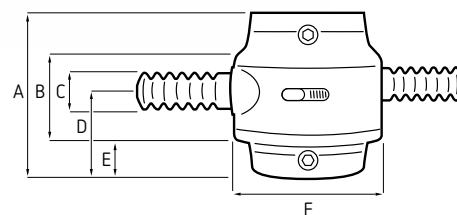

A Altezza totale	60 mm
B Altezza funzionale	27 mm
C Diametro del pulsante	13,5 mm
D Altezza al centro del pulsante	31,6 mm
E Altezza alla separazione	17,5 mm
F Diametro	60 mm

Il periodo di garanzia è di un anno.