

Xtend® Connect Prime

Specifiche Tecniche

Xtend Connect Prime è un adattatore rapido brevettato che consente all'utente di smontare la protesi in parti per facilitare il cambio dei piedi, il cambio dei pantaloni o semplicemente per risparmiare spazio, ad esempio durante i viaggi. Xtend Connect Prime funziona come qualsiasi adattatore e dispone delle interfacce standard più comuni, ed è quindi compatibile con la maggior parte dei prodotti protesici presenti sul mercato.

Bloccaggio doppio

Xtend Connect Prime è l'unico prodotto sul mercato dotato di una doppia funzione di bloccaggio di sicurezza, con pulsante di sicurezza e rotella di bloccaggio. Per garantire un utilizzo sicuro.



Peso del paziente

Il peso massimo consentito è di 150 kg. Controlla sempre il peso del paziente. Il peso massimo non deve essere superato.



Materiale

Il corpo principale di Xtend Connect Prime è realizzato in acciaio inossidabile e il meccanismo di bloccaggio in bronzo di alluminio, mentre le viti sono in titanio e la rotella di bloccaggio in poliammide.

Resistente all'acqua

Tutte le parti di Xtend Connect Prime sono garantite per l'uso in acqua salata, in piscina e in acqua dolce.



Unità di montaggio rapido e Unità di base.

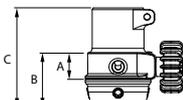
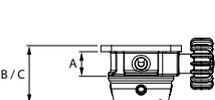
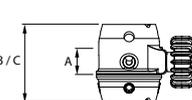
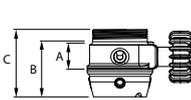
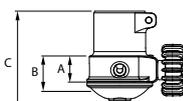
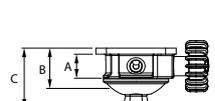
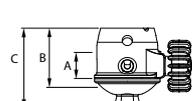
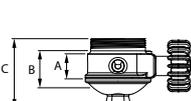
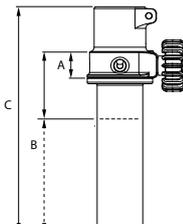
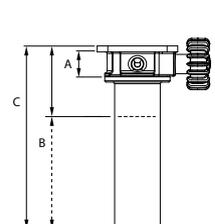
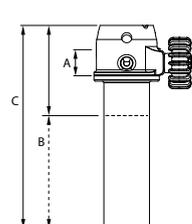
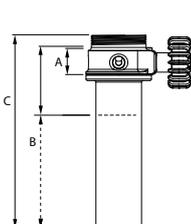
	Codice articolo	Denominazione
	A100-Q30-150	Unità rapida con morsetto per tubi da 30 mm, rotella nera, 150 kg
	A100-Q4-150	Unità rapida con adattatore a 4 fori, rotella nera, 150 kg
	A100-QF-150	Unità rapida con adattatore piramidale femmina, ruota nera, 150 kg
	A100-QP-150	Unità rapida per adattatore a bracci, ruota nera, 150 kg
	A100-BF-150	Unità di base con adattatore piramidale femmina, 150 kg
	A100-BM-150	Unità di base con adattatore piramidale maschio, 150 kg
	A100-B30-150	Unità di base con tubo da 30 mm, 150 kg

Configuratore Xtend Connect Prime



Non sei sicuro/a di quali componenti siano necessari per una configurazione specifica? Scansiona il codice QR e utilizza il nostro configuratore online.

Dati tecnici - Combinazioni

	Q30 Morsetto per tubo da 30 mm, montaggio rapido	Q4 Adattatore a 4 fori, montaggio rapido.	QF Adattatore piramidale femmina, montaggio rapido.	QP dattatore M36, montaggio rapido.
BF Unità di base, adattatore piramidale	 A:19 D:208 B:36 E:332 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:346 C:39	 A:19 D:222 B:52 E:346 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:309 C:45
BM Unità di base, adattatore piramidale	 A:19 D:208 B:24 E:329 C:67	 A:19 D:208 B:27 E:344 C:40	 A:19 D:239 B:40 E:345 C:53	 A:19 D:208 B:25 E:306 C:46
B30 Unità di base, tubo da 30 mm	 A:19 D:208 B:51-151* E:493* C:181	 A:19 D:208 B:54-154* E:507* C:154	 A:19 D:218 B:67-167* E:508* C:167	 A:19 D:208 B:60-160* E:471* C:160

A Altezza funzionale in mm **B** Spazio di ingombro in mm **C** Altezza totale in mm **D** Peso efficace in g **E** Peso totale in g
*B30: Altezza efficace e peso adattabili, poiché il tubo può essere accorciato fino a 100 mm.

Come ordinare

Xtend Connect Prime viene fornito con ruota di bloccaggio nera come standard. Per la ruota di bloccaggio arancione, aggiungere il suffisso -0 al numero dell'articolo. Peso massimo consentito 150 kg. Controlla sempre che il peso del paziente sia corretto. Il peso massimo consentito non deve mai essere superato. Per gli utenti di sport intensivi, il peso massimo consentito è di 100 kg.